

# Hypervolt Plus

使用说明书

# ZH

请在使用前阅读

Hypervolt Plus 是一款手持式冲击理疗设备，有助于缓解肌肉酸痛和僵硬，可加速运动前热身和运动后恢复，并促进血液循环。

## 操作方式

将 Hypervolt Plus 手柄底部的开关调到“ON（打开）”位置。设备打开电源后，一个蓝色的指示灯会亮起，此外（最多）四个表示电池电量的绿色指示灯也会亮起。然后，按下速度设置按钮一次，激活压力传感器。等待 5 秒，白色指示灯依次熄灭。Hypervolt Plus 现在可供使用。

按下压力设置按钮可更改速度（1-3 档），按一下更改一个档位。速度设置按钮上方的蓝色指示灯指示当前速度。


若要更换理疗头，请将所需理疗头直接插入到设备主体/插口，并用力推进。如果是 U 型头，则将理疗头上的“凹槽”对准设备主体上的凹槽/插口，并用力推进。

## 清洁和存储

确保电源关闭且未连接充电器。使用干净的湿布轻轻擦拭 Hypervolt Plus。不用时存放在干净、阴凉的地方。

## 规格

1. 可拆卸电池释放手柄
2. 手柄/可充电锂离子电池
3. 速度指示灯（3 个）
4. 速度设置按钮
5. 压力传感器指示灯
6. 电池电量指示灯（4 个 / LED 条）
7. On（打开） / OFF（关闭）电源开关
8. 可互换理疗头附件（5 个）
9. 蓝牙®连接指示灯

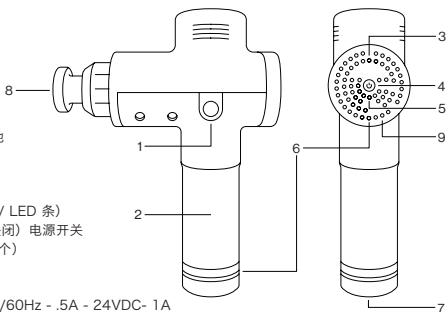

交流充电器：110-240V 50/60Hz - .5A - 24VDC - 1A  
频率 (Hz)：1 档 - 1800/30，2 档 - 2400/40，3 档 - 3200/53  
重量：3 lbs/1.3 kg



危险：为了减少触电、火灾、人身伤害或财产损失的风险，本产品必须按照下列警告、注意事项和安全说明使用：

### 重要安全说明

Hypervolt（“Hypervolt”一词系指 Hypervolt 和 Hypervolt Plus 型号产品）仅供成人使用，且使用时应遵循下列警告和说明。

只能在干燥、清洁的身体表面使用 Hypervolt，在身体上轻轻按压、移动，每个部位持续约六十（60）秒。Hypervolt 只能在身体的软组织部位使用，不得用于身体的任何硬骨部位，包括头部。除轻度肌肉酸痛以外，如感到任何疼痛或不适，请立即停止使用 Hypervolt。无论压力设置如何，使用 Hypervolt 都有可能造成瘀伤，如果产生瘀伤，在瘀伤完全愈合之前，不得在瘀伤部位使用 Hypervolt。在皮肤的所有瘀伤、挫伤、皮疹、发炎或受伤部位完全愈合之前，应避免在这些部位使用 Hypervolt。使用 Hypervolt 时，确保手指、脚趾、头发和其他身体部位远离理头发的背面，以避免夹伤或头发缠结。

Hypervolt 应保持干燥，不得浸入水中，并始终远离液体和热源。Hypervolt 上的通风孔应远离灰尘、碎片和/或任何其他可以进入通风孔的物质，包括但不限于液体、灰尘、沙子或食物。不得连续使用 Hypervolt 超过一（1）小时，每次使用后，请让 Hypervolt 休息至少三十（30）分钟，然后再使用。Hypervolt 只能由设备随附的两脚、双重绝缘 26VDC HYPERICE 充电器（型号 SK03T1-2600100W2 或 MX24D2-2801000）充电。请勿为 Hypervolt 整晚充电或在无人看管的情况下为 Hypervolt 充电或打开设备。充电后，应先将充电器从 Hypervolt 的电池手柄拔出，然后才能使用。处置 Hypervolt 设备之前，必须取下电池。电池必须在适当的电子废物处置或回收设施安全处理。

Hypervolt 不得用于除其预期用途之外的任何用途，不得被丢弃，不得以任何方式改装。

如果符合下列情况，未经医生批准，请勿使用 Hypervolt 或任何冲击或震动设备：

怀孕、患有糖尿病并伴有神经病变或视网膜损伤等并发症、装有心脏起搏器、近期动过手术或受伤、患有癫痫或偏头痛、椎间盘突出、脊椎滑脱、椎弓崩裂或脊椎病、近期动过关节置换手术或装有节育器、金属针或金属板或任何影响您身体健康的问题。体弱人士和儿童应在健康成人的陪同下使用任何冲击或震动设备。这些禁忌并不意味着您不能使用冲击或震动设备，但我们建议您在使用前先咨询医生。我们正在研究冲击理疗对特定疾病的疗效，这可能会缩短上述禁忌列表。



hyperice.com