

Hypervolt

操作說明

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

繁體中文

請先閱讀再使用產品

Hypervolt 是一款手持式衝擊理療裝置，有助於緩解肌肉痠痛及僵硬，加速體能活動前後的暖身與恢復，並促進血液循環。

操作方法

將 Hypervolt 把手底部的開關調到「ON」(開啟) 的位置。裝置電源開啟後將會亮起藍色燈光，加上 (最多) 四個代表電池電量的綠色燈光。接著，按下速度設定按鈕一次以啟動壓力感測器。等待五秒，直到白色燈光依序熄滅。您的 Hypervolt 現已可供使用。

按下速度設定按鈕以變更速度 (1-3)，每按一下可變更一個段速。速度設定按鈕上方的藍色燈光代表目前段速。

若要更換理療頭，請將所需的理療頭直接插入裝置主體/開口，並用力推入。若為 U 型頭，請將 U 型頭上的「凹槽」對準裝置主體/開口上的凹入處，並用力推入。


清潔和存放

確保電源已關閉，且未連接電池充電器。使用乾淨的濕布輕輕擦拭 Hypervolt。不使用時，請存放於乾淨涼爽的地方。

規格

1. 拆卸式電池釋放鈕
2. 把手/充電式鋰離子電池
3. 速度指示器 (3)
4. 速度設定按鈕
5. 壓力感測器指示器
6. 電池電量指示器 (4/LED 條)
7. ON (開) / OFF (關) 電源開關
8. 可替換理療頭 (5)
9. Bluetooth® 連接指示器

交流電充電器：110-240V 50/60Hz - .5A - 24VDC - 1A
頻率 (Hz)：1 段 - 1800/30, 2 段 - 2400/40, 3 段 - 3200/53
重量：2.5 lbs/1.13 kg

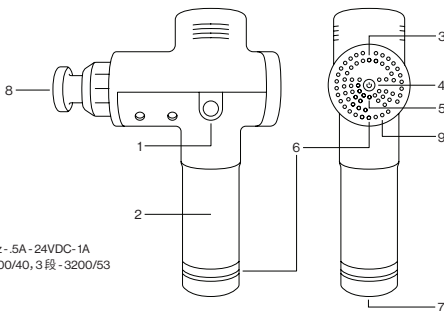



危險：為降低觸電、火災和人身傷害或財產損失的風險，請務必按照以下警告、注意事項和安全說明使用本產品：

重要安全說明

Hypervolt (「Hypervolt」一詞係指 Hypervolt 和 Hypervolt Plus 型號產品) 僅供成人使用，且使用時應一律遵循下列警告和說明。

請僅在乾燥、清潔的身體表面使用 Hypervolt，方法為輕輕按壓並在身體上移動，每個部位停留大約六十 (60) 秒。Hypervolt 僅能用於身體的軟組織區域，不得用於身體任何堅硬或骨頭多的區域，包括頭部。除了肌肉酸痛之外，若您感到任何疼痛或不適，請立即停止使用 Hypervolt。無論壓力設定為何，使用 Hypervolt 都可能會導致擦傷。若確實發生擦傷，則在擦傷完全康復之前，不應在擦傷區域使用 Hypervolt。也應避免在皮膚的所有擦傷、挫傷、皮疹、刺激或受傷部位使用 Hypervolt，直到其完全康復為止。使用 Hypervolt 時，請確保手指、腳趾、頭髮和其他身體部位遠離理療裝置背面，以避免夾傷或纏繞頭髮。

Hypervolt 應保持乾燥，不得浸入水中，且應一律遠離液體和熱源。Hypervolt 上的通風孔應遠離灰塵、碎屑和/或任何其他可能進入通風孔的物質，包括但不限於液體、灰塵、沙子或食物。一次不得連續操作 Hypervolt 超過一 (1) 小時，且每次使用後，請讓 Hypervolt 休息至少三十 (30) 分鐘才再次使用。

HYPERVOLT 僅能以裝置隨附的雙叉、雙重絕緣 26VDC HYPERICE 充電器 (型號 SK03T1-2600100W2 或 MX24D2-2801000) 進行充電。請勿隔夜充電 HYPERVOLT，或在無人看管的情況下為 HYPERVOLT 充電或使用裝置。

為 Hypervolt 充電後，應先將充電器從 Hypervolt 的電池把手拔出，才能進行使用。處置 Hypervolt 裝置之前，需先將電池取出。電池必須在適當的電子廢棄物處置或回收設施中安全地進行處理。

Hypervolt 不得用於其預期用途之外的任何用途、不得摔落，且不得以任何方式改裝或變更。

若符合下列任何情況，則未經醫師允許，請勿使用 HYPERVOLT 或任何衝擊或震動裝置：

懷孕、糖尿病併發神經病變或視網膜受損、佩戴節律器、近期曾進行手術或受傷、癱瘓或偏頭痛、椎間盤突出、脊椎滑脫症、椎弓解離症或椎間節病變、近期更換關節或 IUD (宮內節育器)、鋼釘或鋼板，或任何與您身體健康相關的顧慮。身體虛弱者及兒童應在成人的陪同下使用任何衝擊或震動裝置。這些禁忌症不代表您無法使用衝擊或震動裝置，但我們建議您在使用之前請先諮詢醫師。我們正在研究衝擊理療對特定醫學疾病的效果，這可能會縮短上述的禁忌症清單。



hyperice.com